



CCQ-800

MÁY ĐO TRÒNG TỰ ĐỘNG

Đo lường chính xác và hiệu quả trong sử dụng
mang lại sự thoải mái nhất

Hartmann Sensor (Cảm biến Hartmann)

Cảm biến Hartmann với **nhều điểm đo** hơn giúp tối đa hóa độ chính xác trong việc đo lường **tròng kính đa tròng (progressive lenses)**. Giao diện đồ họa người dùng (GUI) cung cấp hướng dẫn để đơn giản hóa quá trình đo tròng kính đa tròng.

High-speed Processing System (Hệ thống Xử lý Tốc độ Cao)

CCQ-800 được thiết kế với một **hệ thống xử lý song song đa nhân (multi-core parallel processing system)** độc đáo. Khả năng xử lý dữ liệu mạnh mẽ đảm bảo quá trình xử lý **dưới 50 mili giây (50ms)**, từ việc thu thập dữ liệu cho đến khi tính toán kết quả.

Fast & Stable Progressive Lens Measurement (Đo tròng kính Đa tròng Nhanh và Ổn định)



Với cảm biến hình ảnh công nghiệp và nền tảng phần cứng, thiết bị thực hiện **lên đến 40 lần đo và tính toán mỗi giây**. Nhờ khả năng dẫn hướng (guidance) tròng kính đa tròng chính xác và ổn định, cùng với việc tạo ảnh chuyển động tròng kính mượt mà, **khả năng đo lường các loại tròng kính đa tròng khác nhau được cải thiện đáng kể**.

UV Transmittance Measurement (Đo Độ Truyền Quang UV)

CCQ-800 sử dụng **chùm ánh sáng UV-A (365nm)**. Thao tác vận hành dễ dàng và hiển thị **độ truyền quang UV** rõ ràng cho phép đo độ truyền quang UV một cách **nhANH chóng và chính xác**.

Prism layout function (Chức năng Bố trí Lăng kính)

Việc nhập trước **giá trị toa lăng kính (prism prescription value)** cho phép **dễ dàng đánh dấu tâm (blocking)** bằng cách chỉ cần làm theo mục tiêu hiển thị trên màn hình để đánh dấu tròng kính tại **vị trí toa lăng kính**.

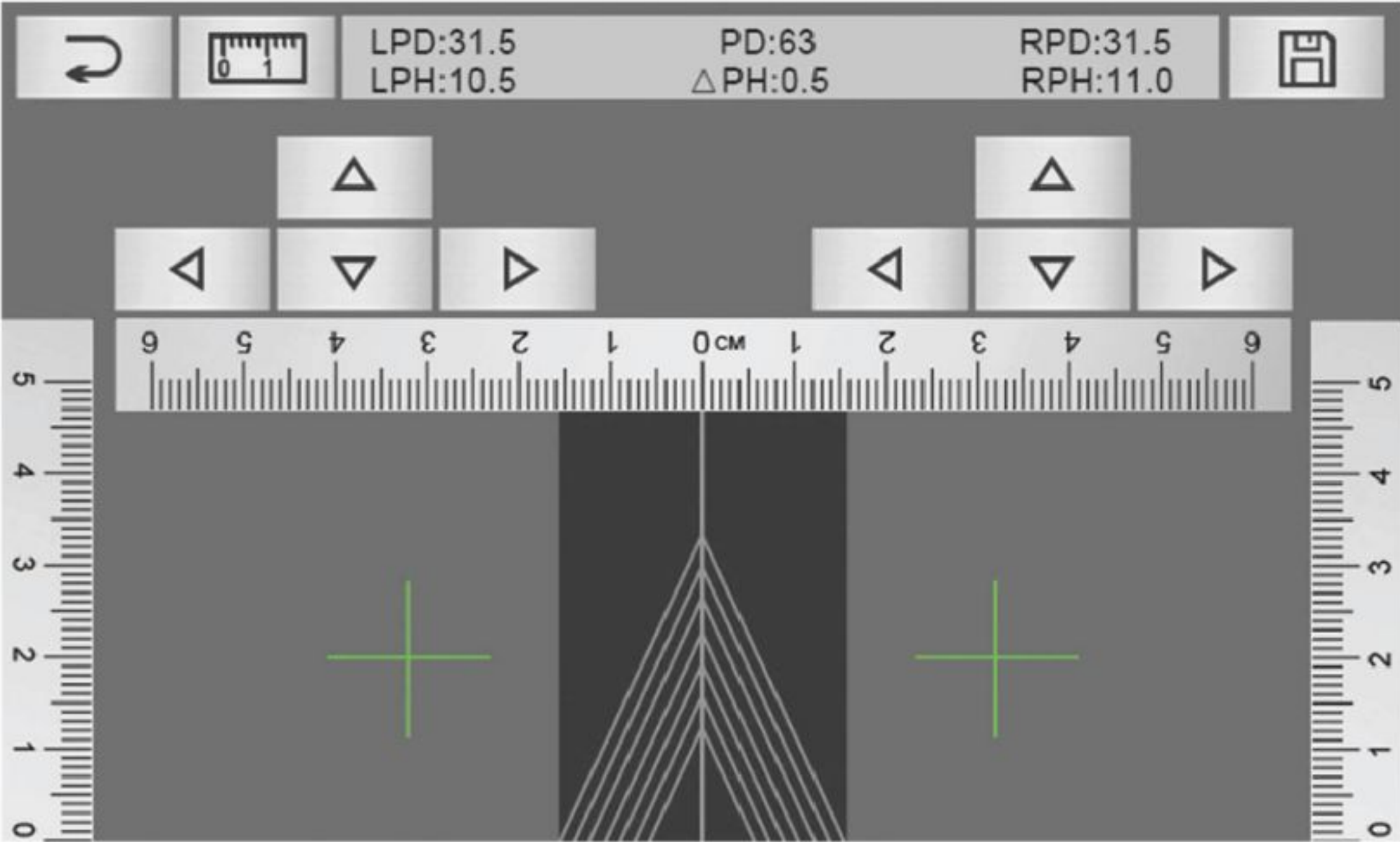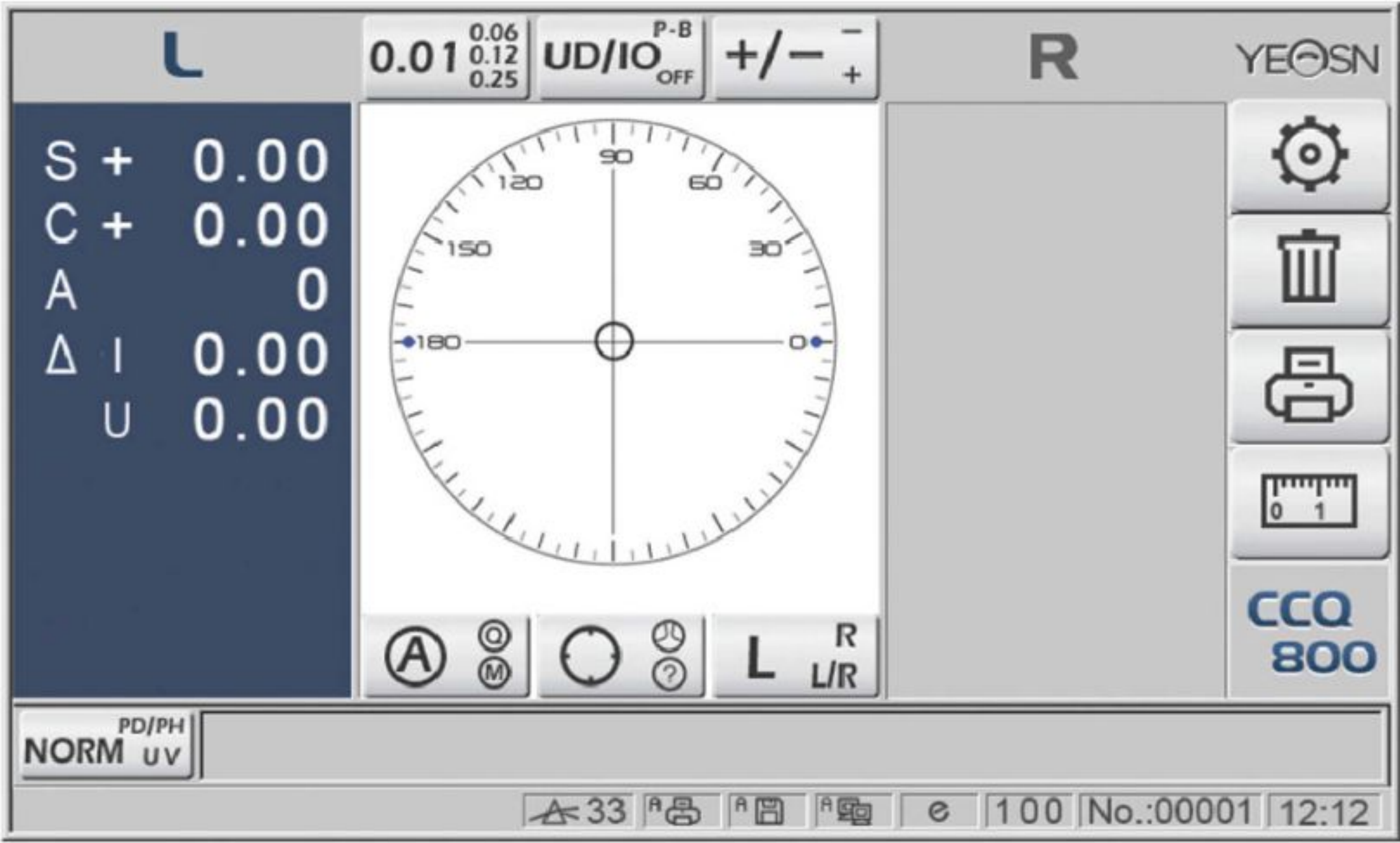

Excellence,
Derived from classics.
Faster, more accurate.



Accurate marking (Lấy dấu Chính xác)

Với công nghệ đánh dấu bằng chuyển động trên ray trượt, thiết bị giảm thiểu hiệu quả sự rung lắc của cơ chế lấy dấu, đảm bảo độ chính xác của việc lấy dấu.

7-inch color TFT Display (Màn hình TFT màu 7 inch)

Màn hình TFT màu cấp độ công nghiệp 7 inch, với độ phân giải 800 x 480 pixel, có giao diện tương tác với các biểu tượng được tinh chỉnh. Tất cả các biểu tượng chức năng đều dễ dàng và đơn giản để vận hành với màn hình rộng cùng góc nhìn không giới hạn.

Lens Recognition (Nhận dạng tròng kính)


CCQ-800 có thể tự động nhận dạng tròng kính đơn tròng (Single vision), đa tròng (progressive) và các loại tròng kính khác, sau đó chuyển sang chế độ đo lường tương ứng.

Low astigmatism lens measurement (Đo tròng kính loạn thị thấp)

Với các thuật toán tiên tiến, CCQ-800 có thể đo các tròng kính có độ loạn thị (astigmatism) thấp đến 0.125D diopter.

Measurement of low transmittance lenses (Đo tròng kính có độ truyền quang thấp)

Với công nghệ điều chỉnh đường quang học vòng kín thích ứng (adaptive close-loop optical path adjustment technology), thiết bị có thể đo các tròng kính có độ truyền quang đến 10% hoặc thậm chí thấp hơn, điều này vượt trội hơn nhiều so với yêu cầu đo lường độ truyền quang 18% của tiêu chuẩn quốc gia ISO.

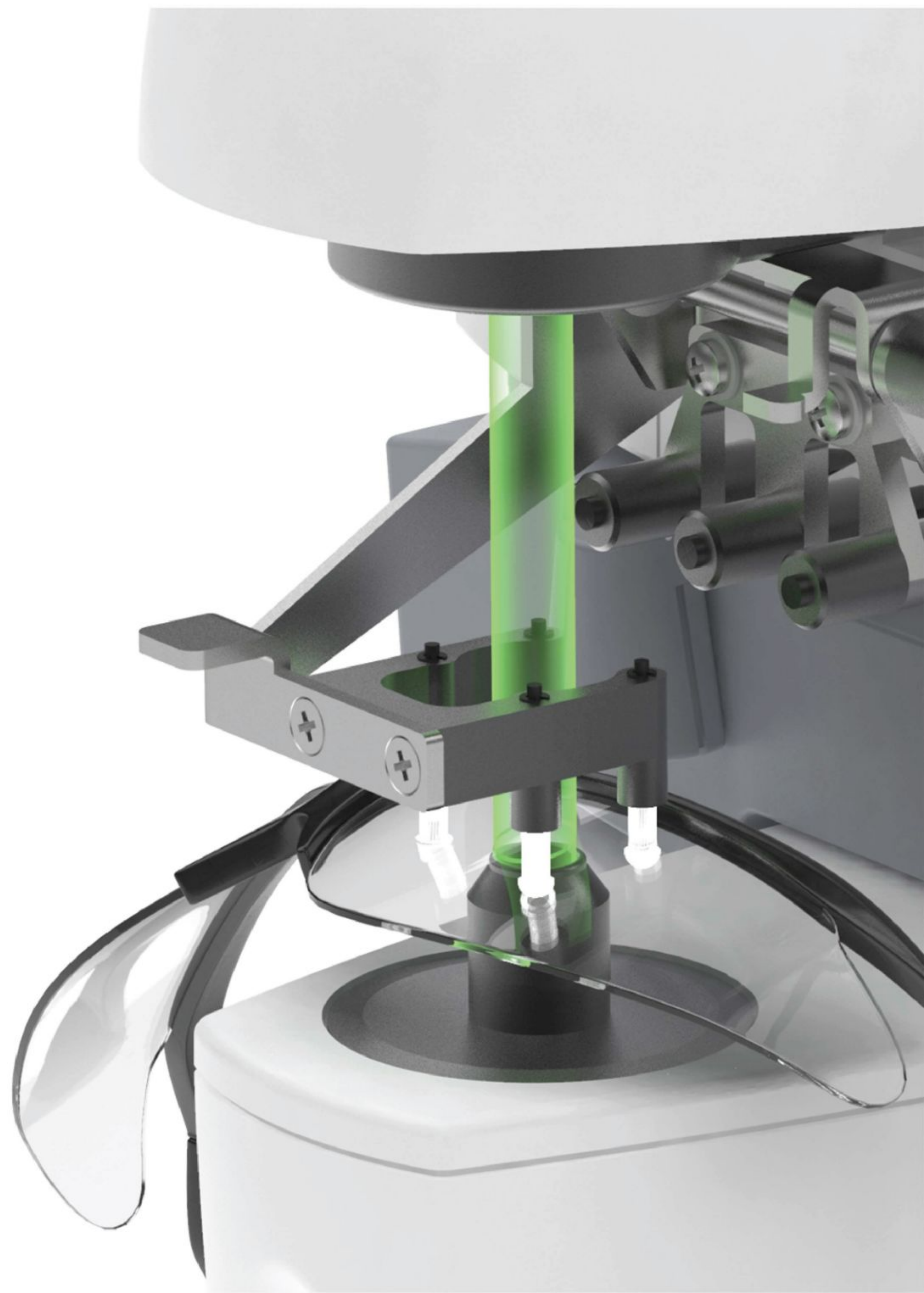

Specification

Measurement range

Sphere	-25D~ +25D
	Step: 0.01D、 0.06D、 0.12D、 0.25D
Cylinder	-9.99D~ +9.99D
	Step: 0.01D、 0.06D、 0.12D、 0.25D
Axis	0~180°, Step: 1°
Prism	0△~20△, Step: 0.01△
Prism Basal Angle	0~360°, Step: 1°
Add	0D~ +9.99D
Contact Lens	-20D~ +20D
	Step: 0.01D、 0.06D、 0.12D、 0.25D
Prism measurement mode	P-B,UD/IO
UV transmittance	0~100%, Step: 1%, wavelength 365nm (UV-A)
Display	7 inch color full graphic, 800×480
Printer	Paper width:57mm; Thermal line printer
Interface	RS-232, USB
Dimensions	235mm(W)×246mm(D)×487mm(H)/6kg
Power Supply	AC (100V~240V) ±10%, 50/60Hz

All indexes in the catalog are only for reference. We regret not informing you of any further modification and our company reserves the right of final interpretation.



📍 5 Danlong Road, Nan' an District, Chongqing,400060,China
✉ sales@yeasn.com
🌐 www.yeasn.com

☎ (86-23)62797666