


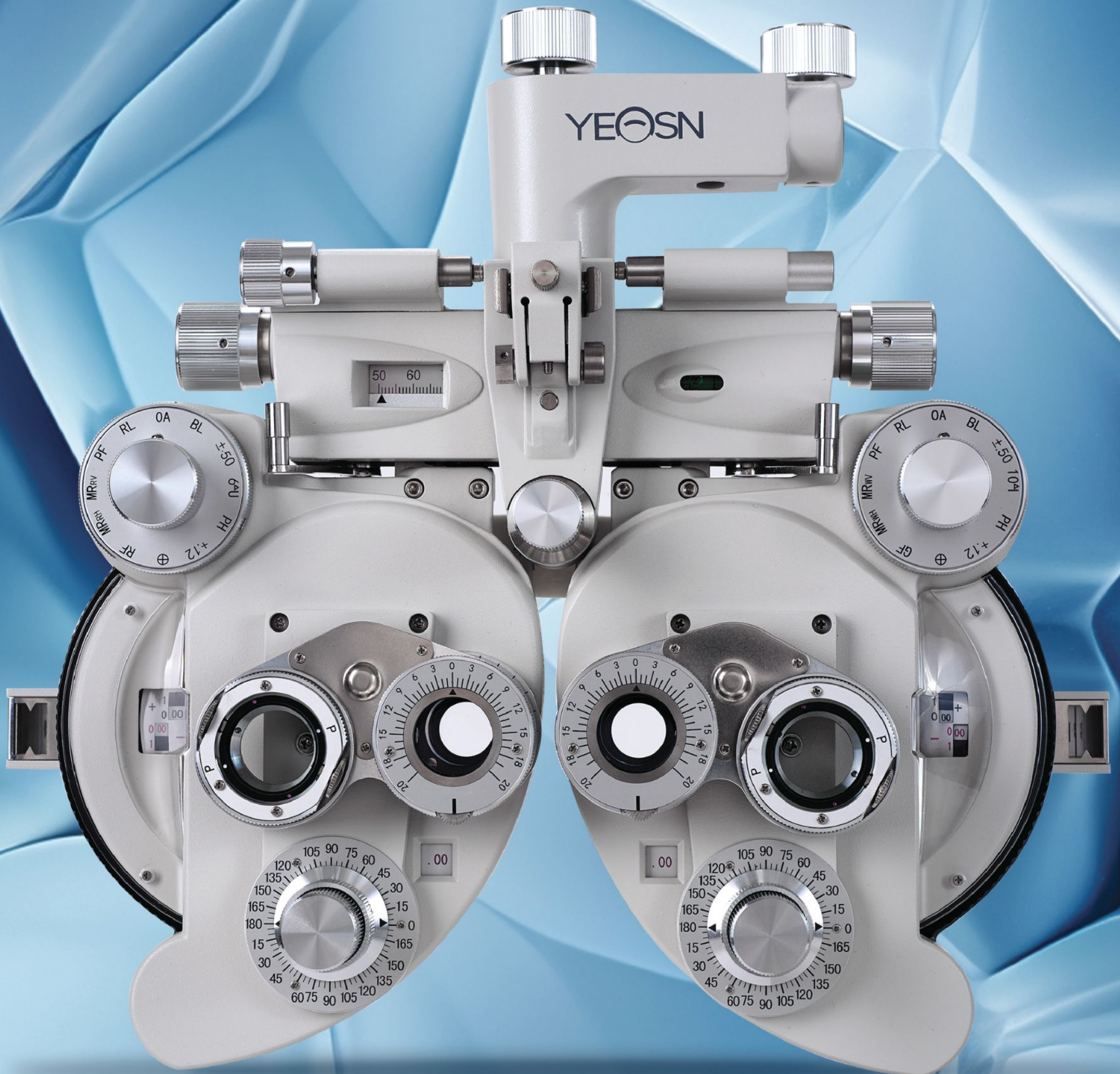

SLY-100

Bộ Thử Thị Lực (Phoropter)

- Được trang bị đầy đủ các loại thấu kính, phù hợp cho việc kiểm tra và chẩn đoán toàn diện các chức năng thị giác.
- Thấu kính cao cấp với nhiều lớp phủ, cơ chế vận hành chính xác, cho kết quả phối hợp công suất khúc xạ chuẩn xác.

Hiệu Suất Quang Học Vượt Trội

SLY-100 sử dụng vật liệu quang học chất lượng cao với nhiều lớp phủ. Quy trình sản xuất tự động giúp đảm bảo độ chính xác và ổn định.

SLY-100 mang lại hiệu suất quang học xuất sắc trong mọi điều kiện kiểm tra.

Thiết Kế Bền Bỉ

Cơ cấu vận hành chắc chắn, vật liệu chống ăn mòn cùng quy trình sản xuất tiên tiến tạo nên độ bền vượt trội.


SLY-100 được thiết kế để hoạt động ổn định ngay cả trong các điều kiện khắc nghiệt.

Vận Hành Tối Ưu

SLY-100 mang lại trải nghiệm thao tác thoải mái. Hệ thống chuyển đổi thấu kính mượt mà, nhanh chóng và êm ái.


Thiết bị giúp giảm thiểu nhiễu và hạn chế mỏi mắt cho bệnh nhân.


Cơ chế vận hành gần như không gây tiếng ồn, mang lại sự dễ chịu tối đa trong suốt quá trình kiểm tra.

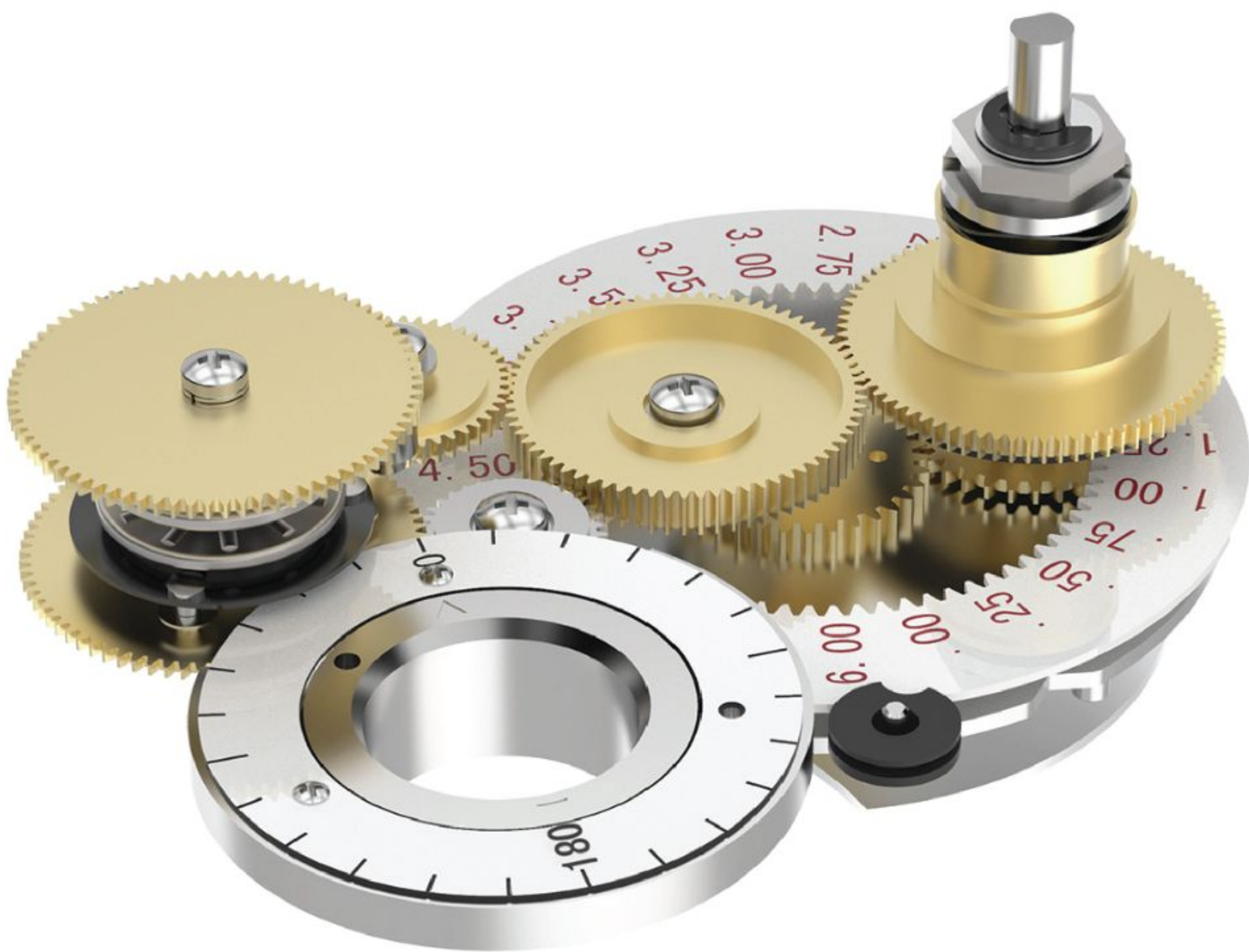

Focus,
To create delicacy.

Each part manifest craftsmanship,
bringing you splendid experience in
different ways.

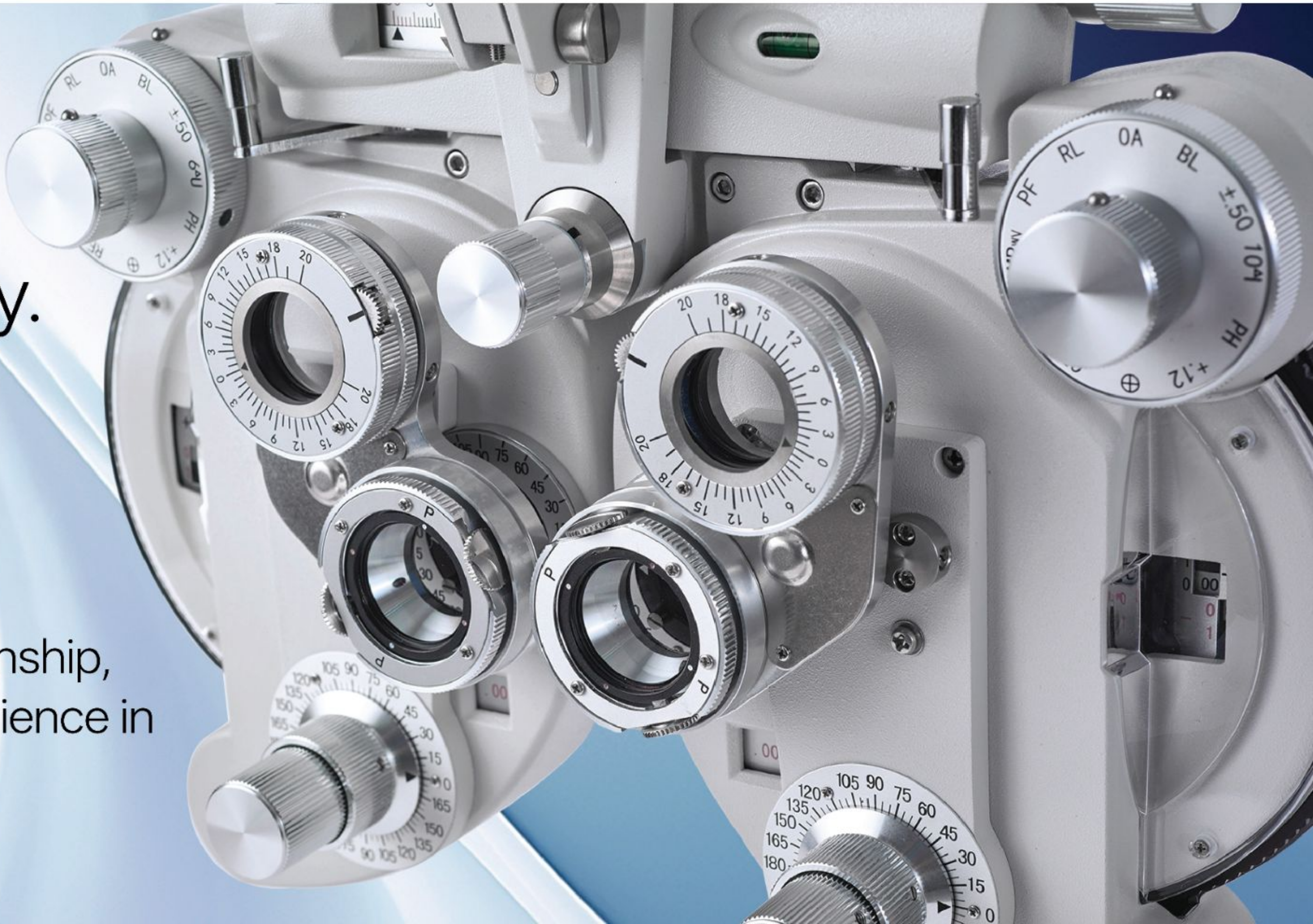

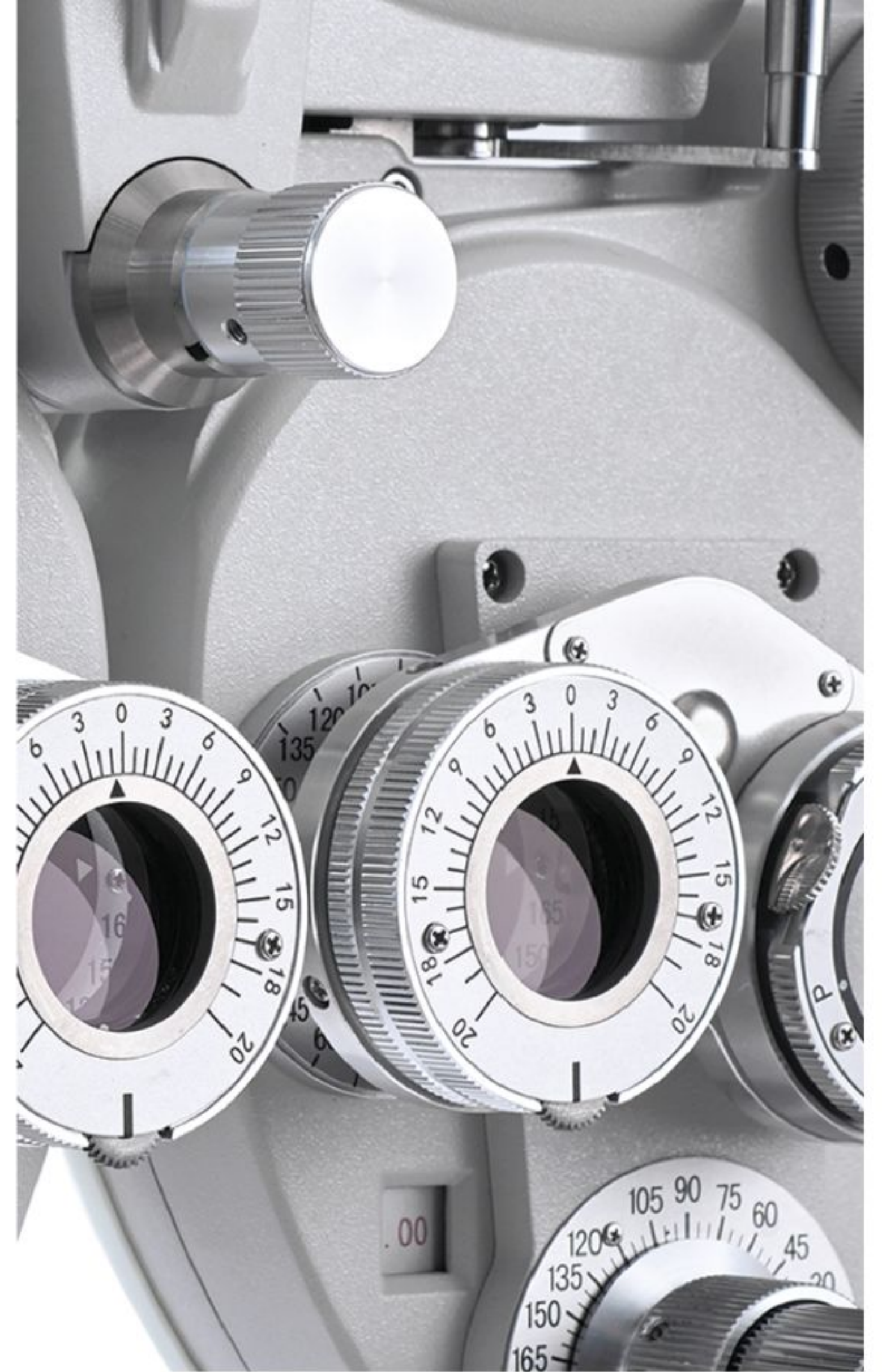

Nhiều Phương Pháp Kiểm Tra

Với nhiều loại thấu kính phụ trợ, SLY-100 hỗ trợ đa dạng phương pháp kiểm tra như:

- Kiểm tra bằng thanh Maddox (Maddox Rod Test).
- Kiểm tra theo phương pháp Von Graefe.
- Kiểm tra Worth 4 Dot và nhiều kỹ thuật khác.



Thấu Kính Bổ Sung

SLY-100 được trang bị sẵn thấu kính phụ, cho phép kiểm tra với dải công suất loạn thị rộng từ 0 đến $\pm 8D$, với bước nhảy chính xác 0.125D.

Thiết Kế Công Thái Học (Ergonomic Design)

Thiết kế dạng cánh bướm mang lại vẻ ngoài tinh tế và hiện đại.

Kiểu dáng nhỏ gọn giúp tiết kiệm không gian, đồng thời hỗ trợ thực hiện các bài kiểm tra nhanh chóng và chính xác cho cả người vận hành và bệnh nhân.



Specification

Measurement range

Sphere	−19.00D ~ +16.75D
	Step: 0.25D (0.12D when 0.12D Auxiliary lens is used)
Cylinder	0 ~ −6.00D (being 0 ~ −8.00D when the Additional Lens is used)
	Step: 0.25D (being 0.12D when Additional Lens is used)
Axis	0 ~ 180°, Step: 5°
Prism	0 ~ 20△, Step: 1△
PD	50mm ~ 75mm

Auxiliary lenses

Cross cylinder lens	±0.25D
Pinhole plate	φ1mm
PD check lens	✓
Red/Green filter	Red (Right) 、 Green (Left)
Polarizing filters	✓
Maddox Rod	Right: Red(Horizontal),Red(Vertical) Left:Wight(Horizontal),Wight(Vertical)
Sphere for retinoscopy	+1.5D (67cm)
Decomposing Prism	Right: 6△BU, Left: 10△BI
Additional Lens	−2.00CYL、 −0.12CYL、 0.00CYL
Forehead rest adjustment	16mm
Refraction distance for near vision	150mm~700mm
Vertex distance marking	13.75mm、 15.75mm、 17.75mm

The above information is for reference only. If there is any change without prior notice, our company reserves the right of final interpretation

